

i-See Touch



HANDLEIDING
USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nederlands.....

NL

English.....

EN

Deutsch.....

DE

Français.....

FR

Remote Control.....

RC

Inhoudsopgave

1	Introductie.....	6
2	Installatie, veiligheid en onderhoud	6
	Installatie.....	6
	Scherm kantelen.....	6
	Scherm in hoogte verstellen	7
	De kabels aansluiten.....	7
	De i-See Touch vervoeren.....	7
	Gebruik	7
3	Bediening - Scherm.....	8
3.1	Beeldweergave.....	8
3.2	Vergroten/verkleinen.....	8
3.3	Auto focus vastzetten.....	8
3.4	Helderheid	8
3.5	Contrast	8
3.6	Witbalans	9
3.7	Geavanceerde leeshulpen	9
3.8	Tableau	9
3.9	Remhendel	9
4	Bediening - Afstandsbediening	10
5	Geavanceerd Menu	10
6	Switch Screen.....	12
7	Richtlijnen	12
8	WEEE & RoHS Richtlijnen	12
9	Garantiebepaling	12
10	Technische specificaties	13

1 Introductie

NL

Gefeliciteerd met uw i-See Touch; een beeldschermloep van hoogwaardige kwaliteit die ook bijzonder gebruiksvriendelijk is met zijn aanraakbediening.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw i-See Touch in gebruik neemt. De informatie in deze handleiding geldt voor zowel de i-See Touch en de i-See Touch met Switch Screen model.

Deze handleiding bevat instructies over hoe het apparaat geïnstalleerd moet worden en beschrijft alle functies.

2 Installatie, veiligheid en onderhoud

Inhoud verpakking

In de doos van de i-See Touch treft u het volgende aan:

- i-See Touch of i-See Touch met Switch Screen
- Stroomkabel
- Handleiding
- Afstandsbediening en Afstandsbedieningontvanger (optioneel accessoire)
- HDMI-kabel (voor i-See Touch met Switch screen functionaliteit)

Installatie



Maak het apparaat nooit zelf open; hiermee vervalt de garantie. Vermoedt u dat onderhoud of reparatie noodzakelijk is, neem direct contact op met de leverancier.

De i-See Touch wordt voorgemonteerd vanuit de fabriek geleverd. Om het apparaat te gebruiken hoeft u alleen het scherm op de gewenste hoogte te schuiven, de stekker achter in het apparaat te steken, de andre zijde in het stopcontact te steken en het apparaat aan te zetten.

Scherm kantelen

U kunt het scherm kantelen door de zijkanen van het scherm stevig vast te pakken en het te kantelen in de gewenste positie.



Scherm in hoogte verstellen

U kunt de hoogte van het scherm verstellen door het stevig aan de zijkanten vast te pakken en het scherm naar boven of naar beneden te trekken in de gewenste positie.



De kabels aansluiten

U hoeft enkel de stroomkabel aan te sluiten. Steek de stekker in de aansluiting achter op het apparaat en de andere zijde in een stopcontact.

De i-See Touch vervoeren

Bij het vervoeren van de i-See Touch wordt aangeraden de monitor helemaal naar voren te kantelen, de monitor helemaal naar beneden te schuiven en het apparaat te vervoeren in de originele verpakking. Wanneer het apparaat zonder originele verpakking wordt vervoerd is er kans dat het apparaat beschadigt.


Gebruik

- Vermijd direct zonlicht op het scherm en het leestableau.
- Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen van het tableau.
- De i-See Touch vraagt weinig tot geen onderhoud. Als u het apparaat aan de buitenzijde wilt schoonmaken, gebruik dan alleen een zachte droge doek. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakproducten zoals alcohol, aceton en andere chemische middelen.
- Gebruik de i-See Touch niet als hulpmiddel om te lopen, zitten of op te staan.
- Schakel het apparaat altijd uit als u er geen gebruik van maakt.
- Zorg ervoor dat de i-See Touch in een voldoende geventileerde ruimte staat.
- Gebruik uw beeldschermloep alleen binnen. Stel het apparaat niet bloot aan extreme of snel veranderende temperaturen of vochtigheid. Plaats uw i-See Touch niet naast een warmtebron of in direct zonlicht.
- Gebruik alleen de bijgeleverde kabels en sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.
- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen. Zorg ervoor dat de i-See Touch minimaal 10 cm van de tafelrand is geplaatst.

3 Bediening - Scherm

NL

De aan/uit schakelaar van de i-See Touch bevindt zich rechtsonder aan de achterkant van de monitor. Om het apparaat aan of uit te zetten, houdt de knop 2 seconden ingedrukt totdat u het opstart- of afsluitdeuntje hoort.

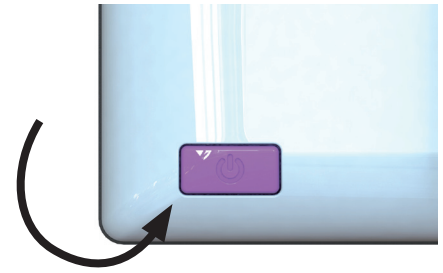

De bediening van de i-See Touch bevindt zich onder het scherm en bestaat uit aanraakknoppen:



3.1 Beeldweergave

Tikken

Tik op dit icoon om door de beschikbare beeldweergave standen te lopen.



Ingedrukt houden

Houd deze knop ingedrukt om te wisselen tussen de laatst gebruikte hoogcontraststand en de fotostand.

Vegen

Veeg van links naar rechts om naar de volgende beeldweergavestand te gaan.

Veeg van rechts naar links om naar de vorige beeldweergavestand te gaan.

3.2 Vergroten/verkleinen

Tik op het min-icoon of houd deze ingedrukt om te verkleinen.

Tik op het plus-icoon of houd deze ingedrukt om te vergroten.

Het vergrotingsniveau wordt op het scherm weergegeven.



3.3 Auto focus vastzetten

Tik op het vergrootglasicoon om de autofocus opnieuw in te stellen op uw leesmateriaal en de autofocus vast te zetten op dat niveau.


Tik op een het min- of plusicoon om deze op te heffen.



3.4 Helderheid

Tikken

Door op dit icoon te tikken kunt u door 5 helderheidsniveaus lopen.

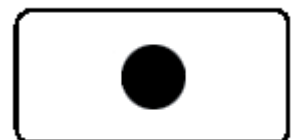

3.5 Contrast

Vegen

Veeg van links naar rechts en houd uw vinger op de rechter zijde van het icoon om het contrast te verhogen.

Veeg van rechts naar links en houd uw vinger op de linker zijde van het icoon om het contrast te verhogen.

Contrast kan alleen worden aangepast in hoog contraststanden, niet in fotostanden.

3.6 Witbalans

Vegen

Veeg van links naar rechts en houd uw vinger op de rechter zijde van het icoon om de witbalans kouder/blauwer te maken.

Veeg van rechts naar links en houd uw vinger op de linker zijde van het icoon om de witbalans warmer/geler te maken.

Witbalans kan alleen worden aangepast in fotostanden, niet in hoog contraststanden.

Helderheid, contrast en witbalans kunnen niet worden aangepast wanneer een leeshulp in gebruik is.

3.7 Geavanceerde leeshulpen

Ingedrukt houden

Houd dit icoon ingedrukt voor het geavanceerde leeshulpen menu.


De volgende leeshulpen zijn beschikbaar:




horizontaal
afdekkader



verticaal
afdekkader

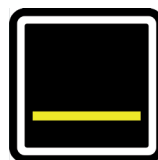

horizontale
leeslijn

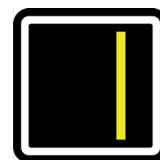

verticale
leeslijn

Veeg omhoog of naar beneden over dit icoon om de gewenste leeshulp te selecteren. Iedere leeshulp heeft vervolgens 5 instellingen die worden aangeduid met een nummer.

Wanneer u de gewenste leeshulp heeft geselecteerd, tik op het icoon om de gewenste instelling te selecteren of veeg van rechts naar links.

Om het geavanceerde leeshulpen menu uit te gaan, houdt het icoon ingedrukt gedurende 2 seconden. De leeshulp zal verdwijnen.

3.8 Tableau

De i-See Touch beschikt over een tableau waarop u uw leesmateriaal kunt plaatsen. Het tableau kan van links naar rechts en van voor naar achteren bewegen.

3.9 Remhendel

Aan de voorkant van het tableau vindt u een remhendel waarmee u de beweging van het tableau kunt bepalen. De hendel heeft 4 posities:

Links	=	Het tableau kan vrij bewogen worden.
Midden-links	=	Vrije beweging van links naar rechts. Beweging van voor naar achter in stappen van 5 millimeter.
Midden-rechts	=	Vrije beweging van links naar rechts. Beweging van voor naar achter geblokkeerd.
Rechts	=	Alle beweging geblokkeerd.

4 Bediening - Afstandsbediening

NL

De i-See Touch kan gebruikt worden met een afstandsbediening. Deze afstandsbediening wordt los verkocht. Een overzicht van de beschikbare afstandsbedieningen en hun functies vindt u op pagina's 42 en 44 van deze gebruikershandleiding. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.




5 Geavanceerd Menu

De i-See Touch bevat een geavanceerd menu waarmee u bepaalde functies kunt (de)activeren. U kunt het geavanceerde menu bereiken door - wanneer het apparaat staat - de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden totdat u het geavanceerde menu ziet. Door op de helderheidsknop te drukken kunt u wisselen tussen de verschillende schermen van het geavanceerde menu.

Met het plus- en min-icoon van de zoomknop kunt u de verschillende functies selecteren. De actieve selectie is te herkennen aan de witte afgeronde rechthoek rond het icoon en de status.

Druk op het vergrootglasicoon van de zoomknop om de huidige selectie aan of uit te zetten. Om het apparaat uit te schakelen en de instellingen op te slaan houdt u de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt.

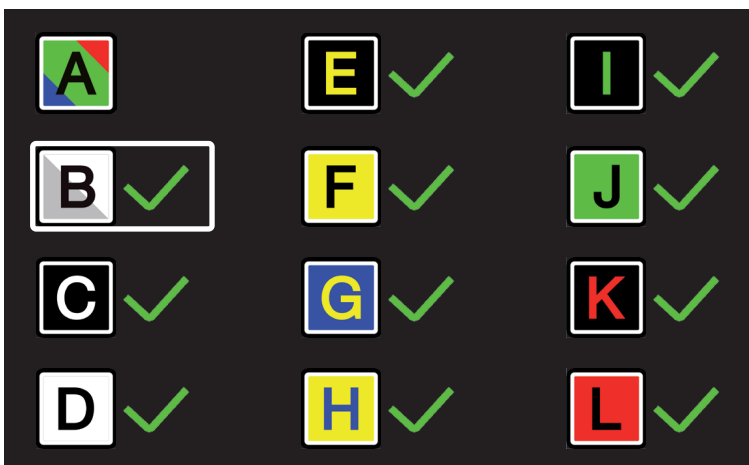


Beeldweergavestanden

Op het eerste scherm kunt u kiezen welke beeldweergavestanden u geactiveerd wilt hebben.

Bij stand A kunt u kiezen tussen de standaard fotostand of fotostand met hoge saturatie. Deze laatste wordt aangeduid met een gele vink naast het icoon.

De andere standen, de hoog contraststanden, kunnen naar wens individueel aan of uit worden gezet.

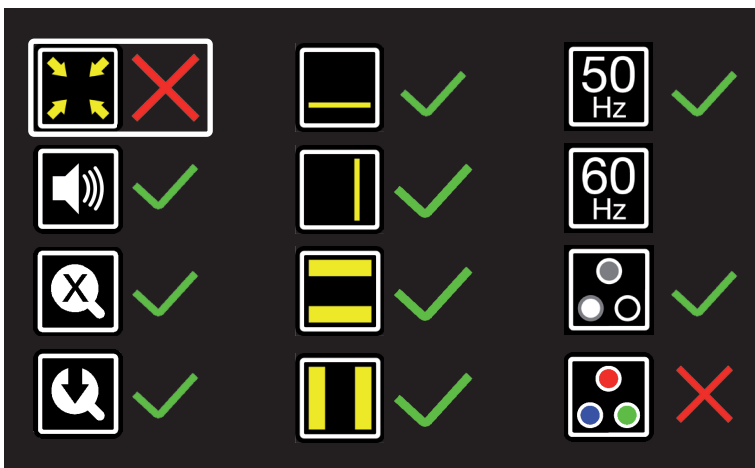

Bijgesneden beeld

De bijgesneden beeldfunctie snijdt het beeld tot 50% zodat een vergrotingsniveau van 1x gebruikt kan worden bereikt. Deze staat standaard uit.



Geluid

Wanneer deze functie aan staat hoort u een piepsignaal wanneer u een functie bedient. Deze staat standaard aan.



Vergrotingsindicator

Wanneer u in- of uitzoomt verschijnt er rechtsboven een vergrotingsindicator die aangeeft wat de vergrotingsfactor is. Deze functie staat standaard aan.




Vergrotingsinstellingen

Wanneer deze functie aan staat zal het apparaat automatisch naar de laatstgebruikte vergroting gaan van de desbetreffende beeldstand gaan wanneer u wisselt van hoog contrast naar fotostand of visa versa. Deze functie staat standaard aan.



Leeshulpen

Hier kunt u de leeshulpen individueel aan of uit zetten. Standaard staan ze allemaal aan.

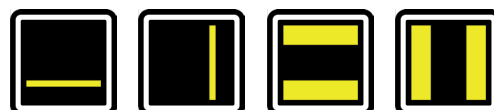

Verversingssnelheid/frequentie

Afhankelijk van uw locatie kan de frequentie van het lichtnet verschillen. Door de frequentie in te stellen op de frequentie die bij gebruikelijk is, 50 of 60 Hertz, kan het zijn dat u door omgevingslicht veroorzaakte flikkeringen in het beeld kunt verminderen. Deze instelling staat standaard op 50 Hertz.




Contrast

Hiermee is de contrastregeling in of uit te schakelen. Dit staat standaard aan.



Witbalans

Hiermee is de contrastregeling in of uit te schakelen. Dit staat standaard uit.

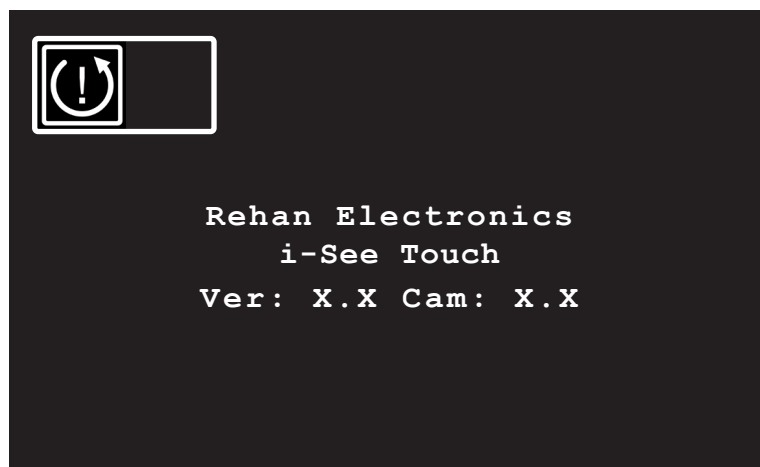

Terug naar fabrieksinstellingen

De functie om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen wist alle instellingen in het geavanceerd menu en opgeslagen waarden.



Software versie

Op de derde en laatste pagina van de geavanceerde instelling vindt u de geïnstalleerde software versie.

6 Switch Screen

NL

Sluit de HDMI-kabel aan op een van de HDMI-poorten op de achterkant van de i-See Touch met Switch Screen functionaliteit en op uw computer. Druk eenmaal op de aan/uitknop om te wisselen tussen de i-See Touch met switch Screen Functionaliteit en uw computer.

7 Richtlijnen

Producten met CE-markering voldoen aan het EMC Directive 2014/30/EC en het Low Voltage Directive 2014/35/EU uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Nakoming van deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende richtlijnen:


Veiligheid: EN62368-1

EMC: EN55032; EN55024

Het apparaat voldoet ook aan FCC onderdeel 15 Class B.

8 WEEE & RoHS Richtlijnen

WEEE Melding

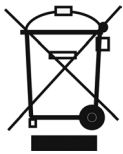

Het WEEE logo (links) op het product of geschreven documentatie houdt in dat het product niet weggegooid mag worden of meegegeven worden bij huishoudelijk afval. Voor meer informatie over elektronische en elektrische afvalverwerking, recycling en ophaalpunten, neem contact op met uw gemeente.

RoHS

Dit product voldoet aan de richtlijn voor beperkingen van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen.

9 Garantiebepaling

Voor alle vragen met betrekking tot de garantie van uw apparaat, neem contact op met uw leverancier.

Bij gebruik van dit apparaat anders dan beschreven in deze handleiding vervalt alle garantie.

10 Technische specificaties

Resolutie		1920 x 1080	
Beeldverversing		50 of 60 Hz	
Beeldafmeting		22 inch (54.6 cm)	
Beeldweergaves <i>Deze standen kunnen worden uitgeschakeld in het geavanceerde menu.</i>	Foto	Volledige kleur (of hoge saturatie)	
		Grijstinten	
	Hoogcontrast	Zwart - wit	Zwart - geel
		Wit - zwart	Geel - blauw
		Groen - zwart	Blauw - geel
		Zwart - groen	Rood - zwart
Geel - zwart	Zwart - rood		
Vergroting (Met een 22" scherm)	Minimum	≈ 2.3x (in bijgesneden beeld ≈ 1x)	
	Maximum	≈ 65x	
Leeshulp	Horizontale Leeslijn	Beschikbaar in alle modellen	
	Verticale Leeslijn	Beschikbaar in alle modellen	
	Horizontaal Afdekkader	Beschikbaar in alle modellen	
	Verticaal Afdekkader	Beschikbaar in alle modellen	
Afmetingen	22"	48 x 48 x 65 cm (screen in highest position)	
Voorkeur Switch Screen instelling		1920 x 1080	
Gewicht		16 kg	
Stroomtoevoer		12 VDC / 4A	
Gebruiksomstandigheden		Temperatuur +5°C tot + 50°C	
		Luchtvochtigheid <70%, geen condensatie	
Opslag- en transportomstandigheden		Temperatuur +0°C tot + 50°C	
		Luchtvochtigheid <90%, geen condensatie	

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze handleiding, neem contact op met uw leverancier.

Table of contents

1	Introduction.....	15
2	Installation, safety and maintenance	15
	Installation.....	15
	Adjust the tilt of the screen.....	15
	Adjust the height of the screen.....	16
	Connecting the cables.....	16
	Transporting the i-See Touch.....	16
	Tips for usage	16
3	Controls - Screen.....	17
3.1	Display Modes.....	17
3.2	Zoom	17
3.3	Block auto focus	17
3.4	Brightness	17
3.5	Contrast.....	17
3.6	White balance.....	18
3.7	Advanced Reading Aids.....	18
3.8	Tableau	18
3.9	Brake Handle.....	18
4	Controls - Remote Control	19
5	Advanced Menu.....	19
6	Switch Screen.....	21
7	Regulations.....	21
8	WEEE & RoHS Directives	21
9	Warranty Information	21
10	Technical specifications.....	22

EN

1 Introduction

Congratulations with your i-See Touch; a desktop video magnifier of high quality that is especially user friendly with its touch sensitive input method.

Read this manual thoroughly before you start to use your i-See Touch. Information in this manual refers to both the i-See Touch and i-See Touch with Switch Screen models. This manual contains instructions on how the device needs to be installed, and describes all of the functions of the i-See Touch.

2 Installation, safety and maintenance

Package contents

The package of the i-See Touch contains the following:

- i-See Touch or i-See Touch with Switch Screen
- Power adaptor
- Manual
- Remote Control and Remote Control Receiver (optional accessory)
- HDMI Cable (for i-See Touch with Switch screen function only)

Installation



Never open up the device yourself; this will void your warranty. If you suspect the device is in need of service or repairs, please contact your supplier.

The i-See Touch will be delivered to you in a pre-assembled state. All you have to do is slide the screen up to your preferred height, connect the adaptor and switch on the device.

Adjust the tilt of the screen

The screen can be tilted by firmly holding the screen on the left and right side, and tilting the screen in your preferred position.



Adjust the height of the screen

The height of the screen can be adjusted by firmly holding the screen on the left and right side, and pulling the screen up or down to your preferred position.



Connecting the cables

The only cable required to be connected is the power cable. Insert the power cable into the back of the device and then into a wall socket.

Transporting the i-See Touch


If the device needs to be transported it is advised to transport it in its original packaging in order to avoid any potential damage to the device.

Tips for usage

- Avoid direct sunlight on the screen and tableau.
- Be careful when handling the moving parts of the reading table.
- The i-See Touch requires little or no maintenance. If you want to clean the exterior of the device, only use a dry cloth. The use of aggressive cleaning products like alcohol, acetone or other chemical substances is prohibited.
- Do not use the i-See Touch as a support for walking, sitting down or getting up.
- Switch off the device if you do not intend to use it.
- Ensure that the i-See Touch is placed in a well ventilated room.
- Place the i-See Touch on a stable surface to prevent it from falling.
- Only use your i-See Touch indoors. Do not expose the device to extreme temperature fluctuations or humidity. Do not place your i-See Touch next to a heat source.
- Only use the supplied cables and connect the adaptor to a wall socket outlet.
- Ensure that the i-See Touch is placed at a minimal distance of 10 cm / 4 inches from the edge of the table.

3 Controls - Screen

The on/off switch of the i-See Touch is located at the lower right hand side on the back of the monitor. To start up or shutdown the device, hold it for 2 seconds until you hear the start up or shutdown tone.

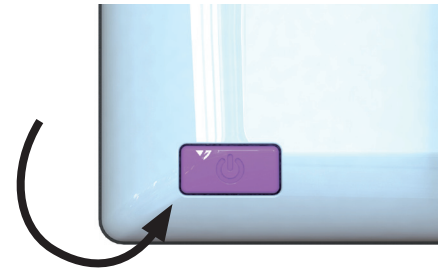

The controls of the i-See Touch can be found below the screen and consist of touch sensitive pads:



EN

3.1 Display Modes

Tap

Tap this icon to cycle through all available display modes.



Press-and-hold

Press and hold the Display Mode icon to quickly switch between your last used high contrast mode and the full colour mode.

Swipe

Swipe from left of right to go to the next display mode in the cycle.

Swipe from right of left to go to the previous display mode in the cycle.

3.2 Zoom

Tap or press and hold the minus icon allows you to zoom out.

Tap or press and hold the plus icon allows you to zoom in.

The magnification level will be shown on screen.



3.3 Block auto focus

By tapping the magnifier icon the device will refocus on your reading material and block the auto focus on that level.


Tap a zoom button to unblock the auto focus.



3.4 Brightness

Tap

By tapping this icon you can cycle through 5 brightness levels.

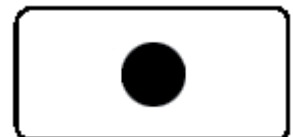

3.5 Contrast

Swipe and hold

Swipe this icon from left to right and hold your finger on the right side of the rounded rectangle to gradually increase the contrast.

Swipe this icon from right to left and hold your finger on the left side of the rounded rectangle to gradually decrease the contrast.

Contrast can only be adjusted in high contrast modes, not in photo modes.

3.6 White Balance

Swipe and hold

Swipe this icon from left to right and hold your finger on the right side of the rounded rectangle to gradually change the white balance to the colder, bluer side.

Swipe this icon from right to left and hold your finger on the left side of the rounded rectangle to gradually change the white balance to the warmer, oranger side.

White balance can only be adjusted in photo modes, not in high contrast modes.

Brightness, contrast and White balance can't be adjusted when reading aids are in use.

3.7 Advanced Reading Aids

Press-and-hold

Press and hold this icon to enter the Advanced Reading Aids menu.


The following reading aids are available:




horizontal
blanking



vertical
blanking

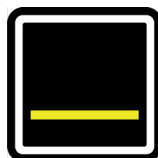

horizontal
line

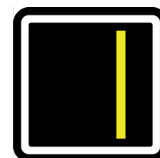

vertical
line

Swipe up or down over this icon to select the desired reading aid required. Each reading aid has 5 settings that are indicated by a number shown in the icon.

To change the setting value you can tap this icon to go to the next level or you can swipe from right to left.

To change to a different reading aid then swipe up or down over this icon and then tap to set the desired level of the reading aid selected.

To exit from the Advanced Reading Aids menu press and hold this icon for 2 seconds. The reading aid will now disappear from the screen.

3.8 Tableau

The i-See Touch contains a tableau on which you can place your reading material. The tableau can move from left to right and from front to back.

3.9 Brake Handle

In front of the tableau of the i-See Touch you will find a single brake handle with which you can control the movement of the tableau. The handle has 4 positions:

- | | | |
|--------------|---|---|
| Left | = | The tableau can be moved freely. |
| Middle-left | = | Free movement from left to right.
Front to back movement can be adjusted by 5 millimeter increments by moving the tableau. |
| Middle-right | = | Free movement from left to right, front to back movement is blocked. |
| Right | = | All movement of the tableau is blocked. |

4 Controls - Remote Control

The i-See Touch can be used with a remote control. This remote control is sold separately. An overview of the available Remote Controls and its functions can be found on pages 42 and 44 of this User Manual. Contact your supplier for more information.




EN

5 Advanced Menu

The i-See Touch contains an advanced menu with which you can (de)activate certain functions of the i-See Touch. You can access the advanced menu by ensuring the device is switched off, then holding the on/off button approx. 10 seconds until you hear a beep after the start up tone.

By tapping the brightness icon you can cycle through multiple screens of selectable options. Tap the plus icon of the zoom button to highlight which mode you wish to change. You can recognize the highlighted function by the white rounded rectangle around it. Tap the magnifier icon to activate/deactivate your selection.


To save any changes, or to exit without making changes power off the device and power it on again.

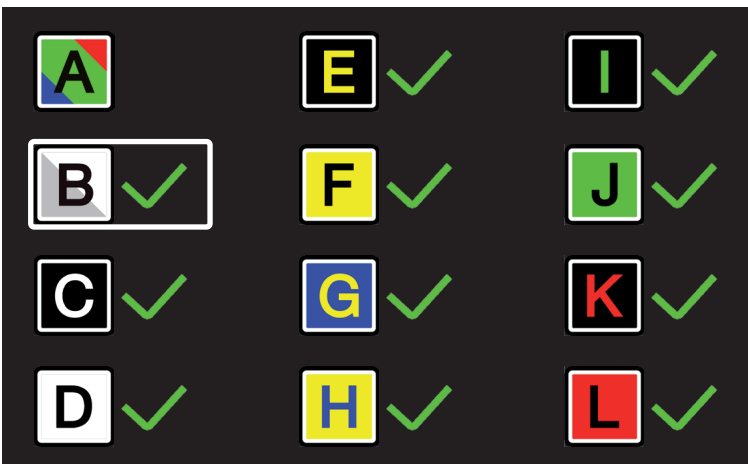

Display modes

On the first screen you can select whether you want the photo mode to have realistic or high saturation colors and which high contrast mode you want available in your i-See Touch live mode.

The second screen shows advanced functions.

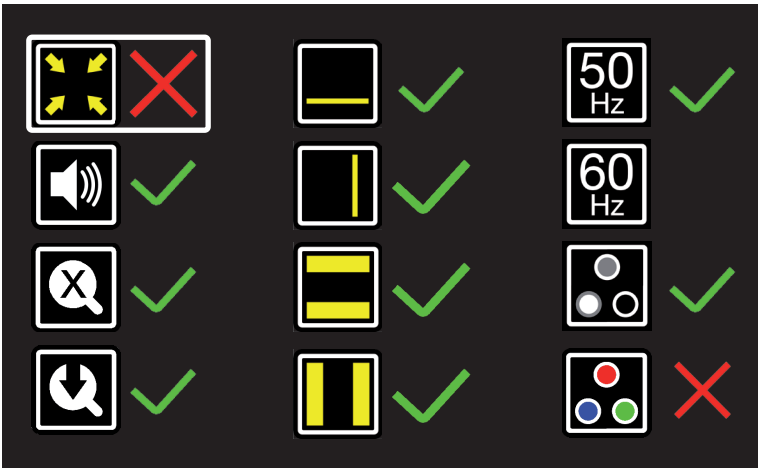

Crop zoom

The crop zoom function crops the image on screen to 50% so that a zoom level of 1x can be achieved. This function is originally off.



Sound feedback

When this function is on you hear a beep when you change a function. This function is originally on.



Magnification indicator

When you zoom in or out a magnification indicator shows up in the top left corner that shows what the magnification factor is. This function is originally on.



Zoom preset

When this function is on the device will go to the last used magnification in high contrast modes and photo mode when you switch to these functions. This function is originally on.



Reading aids

This will let you turn reading aids on or off individually. These functions are originally on.



Refresh rate / frequency

Depending on your location the mains power frequency will be 50 or 60 Hertz. By selecting the right setting you will suppress flickering caused by surrounding light. This function is originally set to 50Hz.




Contrast

With this function you can turn the manual contrast adjustment on or off. This function is originally on.



White balance

Select whether you want the ability to manually set the white balance in the photo modes. This function is originally off.

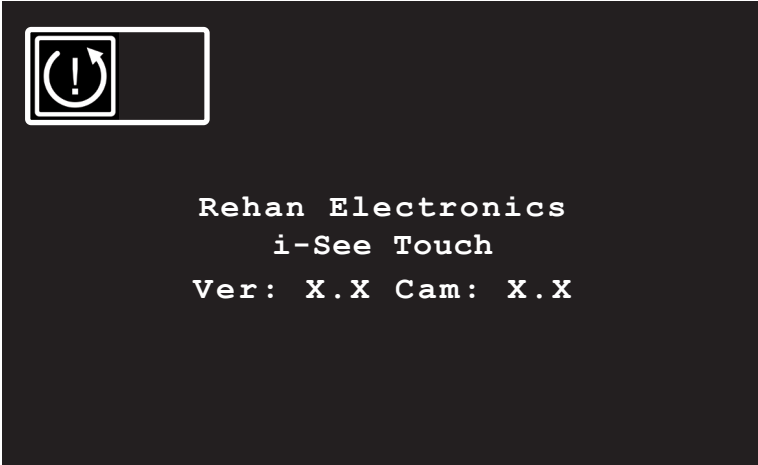

Factory reset

By turning this function on you will reset the device to factory settings.

This counts for all advanced functions and the last used magnification presets.



Software version

You will find the installed software version of the main board and its camera.

6 Switch Screen

Connect the HDMI cable from one of the HDMI ports at the back of the i-See Touch to your computer. Press the On/Off button once to toggle between the i-See Touch and your computer.

7 Regulations

Products with CE marking comply with EMC Directive 2014/30/EC and the Low Voltage Directive 2014/35/EU issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following standards:


Safety: EN62368-1

EMC: EN55032; EN55024

The device also complies to FCC part 15 Class B

EN

8 WEEE & RoHS Directives

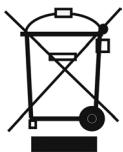

WEEE Notice

The WEEE logo (shown left) on the product or its literature indicates that the product must not be disposed of or dumped with your household waste. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery and collection points, please check your local regulations.

RoHS Compliance

This product is in compliance with the Restrictions of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) Directive.

9 Warranty Information

For all queries regarding warranty of your device, please contact your supplier for further information.

Use of the device other than described in this manual will exclude it from warranty conditions.

10 Technical specifications

Resolution		1920 x 1080	
Video refresh rate		50 Hz or 60 Hz	
Display size		22 inch (54.6 cm)	
Display modes <i>These display modes can be turned off in the advanced menu.</i>	Photograph	Full colour (or high saturation)	
		Greyscale	
	High contrast	Black - white	Black - yellow
		White - black	Yellow - blue
		Green - black	Blue - yellow
		Black - green*	Red - black
Yellow - black	Black - red		
Magnification (With a 22" screen)	Minimum	≈ 2.3x (when in crop mode ≈1x)	
	Maximum	≈ 65x	
Reading Aid	Horizontal Reading Line	Available in all models	
	Vertical Reading Line	Available in all models	
	Horizontal Block Blank	Available in all models	
	Vertical Block Blank	Available in all models	
Dimensions	22"	48 x 48 x 65 cm (screen in highest position)	
Preferred switch screen settings		1920 x 1080	
Weight		16 kg	
Power supply		12 VDC / 4A	
Conditions of use		Temperature +5°C til + 50°C	
		Humidity <70%, no condensation	
Conditions of storage and transport		Temperature +0°C til + 50°C	
		Humidity <90%, no condensation	

If you have any questions after reading this manual, please contact your supplier.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	24
2	Installation, Sicherheit und Wartung	24
	Installation.....	24
	Einstellen der Bildschirmneigung	24
	Einstellen der Bildschirmhöhe	25
	Anschließen der Kabel.....	25
	Transport des i-See Touch.....	25
	Tipps für die Verwendung.....	25
3	Steuerungen - Bildschirm	26
3.1	Anzeigemodi.....	26
3.2	Zoomen	26
3.3	Autofokus blockieren.....	26
3.4	Helligkeit.....	26
3.5	Kontrast	26
3.6	Weißabgleich	27
3.7	Erweiterte Lesehilfen	27
3.8	Lesetisch	27
3.9	Bremsgriff.....	27
4	Steuerungen - Fernsteuerung.....	28
5	Erweitertes Menü.....	28
6	Switch Screen.....	30
7	Richtlinien	30
8	WEEE & RoHS Richtlinien	30
9	Garantieinformationen	30
10	Technische Daten	31

DE

1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem i-See Touch, ein qualitativ hochwertiger Desktop Videovergrößerer, der dank seines berührungsempfindlichen Eingabemodus besonders nutzerfreundlich ist.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren i-See Touch in Betrieb nehmen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen beziehen sich sowohl auf den i-See Touch als auch den i-See Touch mit Switch Screen-Modellen.

Dieses Handbuch enthält Anleitungen dazu, wie dieses Gerät installiert werden muss, und beschreibt alle Funktionen des i-See Touch.

2 Installation, Sicherheit und Wartung

Verpackungsinhalt

Die Verpackung des i-See Touch enthält Folgendes:

- i-See Touch oder i-See Touch mit Switch Screen
- Netzadapter
- Handbuch
- Fernsteuerung und Fernsteuerungs-Empfänger (optionales Zubehör)
- HDMI-Kabel (nur für i-See Touch mit Switch-Screen-Funktion)

Installation



Öffnen Sie das Gerät niemals selbst; dadurch verlieren Sie Ihren Garantieanspruch. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät der Wartung oder Reparatur bedarf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Lesehilfe wird vormontiert an Sie geliefert. Sie brauchen nur noch den Bildschirm auf die gewünschte Höhe einstellen, den Adapter anzuschließen und das Gerät einzuschalten.

Einstellen der Bildschirmneigung

Zum Einstellen der Bildschirmneigung halten Sie den Bildschirm an der linken und rechten Seite fest und neigen den Bildschirm in die von Ihnen bevorzugte Position.



Einstellen der Bildschirmhöhe

Zum Einstellen der Bildschirmhöhe halten Sie den Bildschirm an der linken und rechten Seite fest und ziehen den Bildschirm nach oben oder unten in die von Ihnen bevorzugte Position.



Anschließen der Kabel

Das einzige Kabel, das angeschlossen werden muss, ist das Netzkabel. Stecken Sie das Netzkabel in die Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose.

Transport des i-See Touch


Wenn das Gerät transportiert werden muss, wird empfohlen, dies in der Originalverpackung zu tun, um eine eventuelle Beschädigung des Geräts zu verhindern.

Tipps für die Verwendung

- Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm und den Lesetisch.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Teile des Lesetischs bewegen.
- Der i-See Touch benötigt nur wenig oder gar keine Wartung. Wenn Sie das Gerät außen reinigen möchten, verwenden Sie einfach ein trockenes Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Alkohol, Aceton und anderen chemischen Produkten ist verboten.
- Nutzen Sie den i-See Touch nicht als Stütze beim Gehen, Hinsetzen oder Aufstehen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden möchten.
- Stellen Sie sicher, dass der i-See Touch in einen gut belüfteten Raum aufgestellt wird.
- Stellen Sie den i-See Touch auf einen stabilen Untergrund, um Umfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie Ihren i-See Touch nur in Innenräumen. Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturschwankungen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie Ihren i-See Touch nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass der i-See Touch in einem Mindestabstand von 10 cm von der Tischkante aufgestellt wird.

3 Steuerungen - Bildschirm

Der Ein-/Aus-Schalter des i-See Touch befindet sich an der rechten unteren Seite des Bildschirms. Um das Gerät hochzufahren oder auszuschalten, halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Signalton für das Hochfahren oder Ausschalten des Geräts hören.

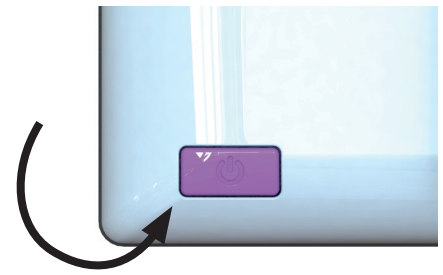

Die Steuerungen des i-See Touch finden sich unter dem Bildschirm und bestehen aus berührungsempfindlichen Feldern.



3.1 Anzeigemodi

Tippen

Tippen Sie auf dieses Icon, um sich durch alle verfügbaren Anzeigemodi zu bewegen.



Drücken und halten

Drücken und halten Sie das Anzeigemodus-Icon, um schnell zwischen Ihrem letzten Hochkontrast- und Vollfarben-Modus umzuschalten.

Wischen

Wischen Sie von links nach rechts, um zum nächsten Anzeigemodus im Zyklus zu gelangen. Wischen Sie von rechts nach links, um zum vorherigen Anzeigemodus im Zyklus zu gelangen.

3.2 Zoomen

Tippen oder drücken und halten Sie das Minus-Icon, um auszuzoomen. Tippen oder drücken und halten Sie das Plus-Icon, um einzuzoomen. Die Vergrößerungsebene wird auf dem Bildschirm angezeigt.



3.3 Autofokus blockieren


Durch Antippen des Vergrößerungs-Icons fokussiert das Gerät erneut auf Ihr Lesematerial und blockiert den Autofokus auf dieser Ebene. Tippen Sie auf eine Zoom-Taste, um die Blockade des Autofokus wieder aufzuheben.



3.4 Helligkeit

Tippen

Durch Antippen dieses Icons können Sie durch 5 Helligkeitsstufen navigieren.

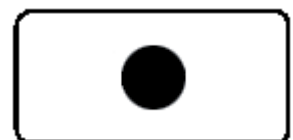

3.5 Kontraststärke

Wischen und Halten

Wischen Sie dieses Symbol von links nach rechts und halten Sie Ihren Finger auf der rechten Seite des abgerundeten Rechtecks, um die Kontraststärke allmählich zu erhöhen.

Wischen Sie dieses Symbol von rechts nach links und halten Sie Ihren Finger auf der linken

Seite des abgerundeten Rechtecks, um die Kontraststärke allmählich zu verringern. Die Kontraststärke kann nur in Hochkontrastmodi angepasst werden, nicht in Foto-Modi.

3.6 Weißabgleich

Wischen Sie dieses Symbol von links nach rechts und halten Sie Ihren Finger auf der rechten Seite des abgerundeten Rechtecks, um der Weißabgleich allmählich zu erhöhen.

Wischen Sie dieses Symbol von rechts nach links und halten Sie Ihren Finger auf der linken Seite des abgerundeten Rechtecks, um der Weißabgleich allmählich zu verringern.

Der Weißabgleich kann nur in Foto-Modi angepasst werden, nicht in Hochkontrastmodi.

Bitte beachten Sie, dass die Helligkeit, die Kontraststärke und der Weißabgleich nicht eingestellt werden können, wenn Lesehilfen im Gebrauch sind.

3.7 Erweiterte Lesehilfen

Drücken und Halten

Drücken und halten Sie dieses Icon, um das Erweiterte Lesehilfen-Menü zu öffnen.

Die folgenden Lesehilfen sind verfügbar:




Horizontale

Blockausblendung




Vertikale

Blockausblendung

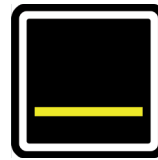

Horizontale

Leselinie

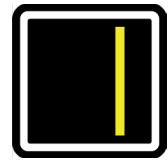

Vertikale

Leselinie

Wischen Sie nach oben oder unten über dieses Icon, um die gewünschte erforderliche Lesehilfe auszuwählen. Jede Lesehilfe hat 5 Einstellungen, die durch eine Nummer im Icon angezeigt wird.

Sobald die gewünschte Lesehilfe ausgewählt wurde, tippen Sie auf dieses Icon, um die gewünschte Einstellung der Lesehilfe einzustellen.

Um diesen Einstellungswert zu ändern, tippen Sie auf dieses Icon, um zur nächsten Ebene zu gelangen, oder Sie können von rechts nach links wischen.

Um auf eine andere Lesehilfe umzustellen, wischen Sie nach oben oder unten über dieses Icon und tippen Sie dann auf die gewünschte Ebene der ausgewählten Lesehilfe.

Um das Erweiterte Lesehilfen-Menü zu verlassen, drücken und halten Sie dieses Icon 2 Sekunden lang. Die Lesehilfe verschwindet jetzt vom Bildschirm.

3.8 Lesetisch

Der i-See Touch enthält einen Lesetisch, auf den Sie Ihr Lesematerial auflegen können. Der Lesetisch kann von links nach rechts und von vorne nach hinten bewegt werden.

3.9 Bremsgriff

An der Vorderseite des Lesetischs des i-See Touch finden Sie einen einzelnen Bremsgriff, mit dem Sie die Bewegungen des Lesetischs steuern können. Der Griff hat 4 Positionen:

Links = Der Lesetisch kann frei bewegt werden.

Mitte links = Freie Bewegung von links nach rechts.

Die Bewegung von vorne nach hinten kann in Schritten von 5 Millimetern eingestellt werden, indem der Lesetisch bewegt wird.

Mitte rechts = Die freie Bewegung von links nach rechts und vorne nach hinten ist blockiert.

Rechts = Jegliche Bewegung des Lesetischs ist blockiert.


4 Steuerungen - Fernsteuerung

Das i-See Touch kann mit einer Fernbedienung verwendet werden. Die Fernbedienung ist separat erhältlich. Eine Übersicht über die verfügbaren Fernbedienungen und deren Funktionen finden Sie auf den Seiten 42 und 44 dieser Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler.



5 Erweitertes Menü

Der i-See Touch enthält ein erweitertes Menü, mit dem Sie bestimmte Funktionen des i-See Touch (de)aktivieren können. Sie können wie folgt auf das erweiterte Menü zugreifen: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und drücken Sie dann die Taste On/Off etwa 10 Sekunden lang, bis Sie nach dem Einschalten einen Piepton hören. Wenn Sie nun auf das Symbol für die Helligkeit tippen, können Sie durch mehrere Bildschirme mit auswählbaren Optionen blättern. Tippen Sie auf das Plus-Symbol der Zoom-Taste, um den Modus hervorzuheben, den Sie ändern möchten. Sie erkennen die hervorgehobene Funktion an dem weißen abgerundeten Rechteck, das sie umgibt. Tippen Sie dann auf das Vergrößerungs-Symbol (die Lupe), um Ihre Auswahl zu aktivieren/zu deaktivieren.

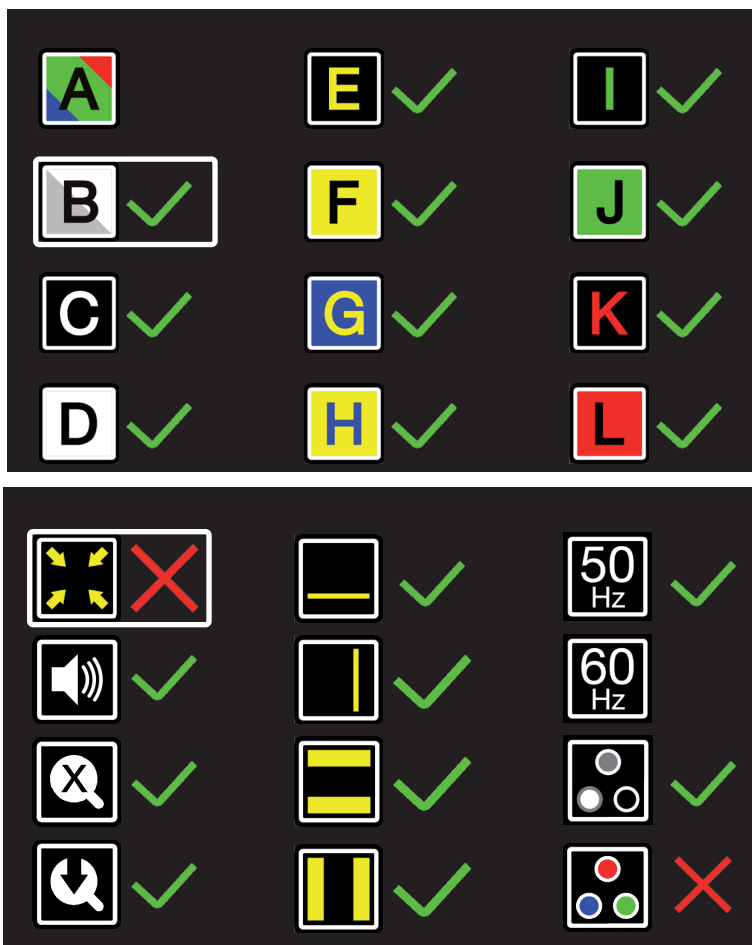

Um etwaige Änderungen zu speichern oder das Menü ohne Änderungen zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und anschließend erneut ein.

Anzeigemodi

Auf dem ersten Bildschirm können Sie auswählen, ob der Fotomodus mit realistischen Farben oder mit Farben mit hoher Sättigung angezeigt werden soll, und welcher Modus mit hoher Kontraststärke im Startmodus Ihres i-See Touch verfügbar sein soll. Auf dem zweiten Bildschirm werden die erweiterten Funktionen angezeigt.

Ausschnitt-Zoom-Funktion

Beschneidet das Bildschirmbild auf 50 %, sodass eine Zoom-Ebene von 1x erreicht werden kann. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.

DE

Akustische Rückkopplung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, hören Sie jedes Mal einen Piepton, wenn Sie eine Funktion ändern. Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.



Anzeige der Vergrößerung

Wenn Sie vergrößern bzw. verkleinern wird in der oberen linken Ecke eine Lupe angezeigt die den Vergrößerungsfaktor angibt. Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.



Zoom-Voreinstellung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wechselt das Gerät zu der zuletzt verwendeten Vergrößerung in den Modi mit hoher Kontraststärke und im Fotomodus, wenn Sie zu diesen Funktionen umschalten.

Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.




Lesehilfen

Hiermit können Sie die Lesehilfen einzeln ein- oder ausschalten. Diese Funktionen sind standardmäßig eingeschaltet.




Erneuerungsgeschwindigkeit/-frequenz

Je nach Ihrer geografischen Position arbeitet das Stromnetz mit einer Frequenz von 50 oder 60 Hertz. Wählen Sie die richtigen Einstellungen für das i-See Touch aus; so unterdrücken Sie Flimmern durch umgebende Lichtquellen. Diese Funktion ist werkseitig auf 50 Hz eingestellt.

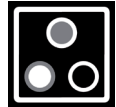

Kontraststärke

Mit dieser Einstellung kann die manuelle Kontrastregelung ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.

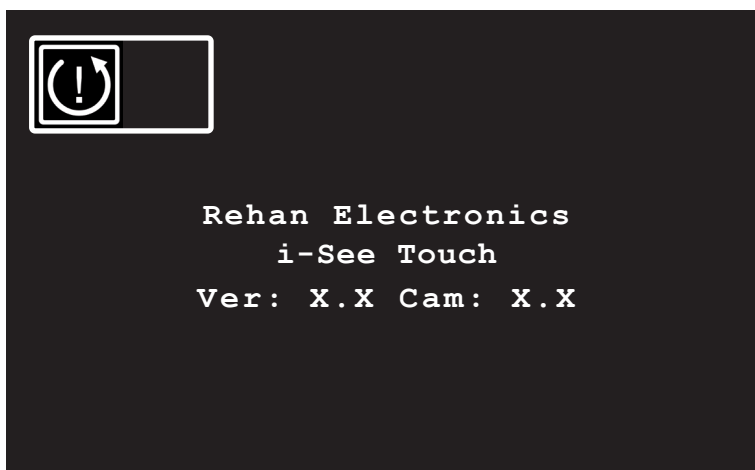

Weißabgleich

Mit dieser Einstellung kann die manuelle Weißabgleich ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.



Zurücksetzen Fabrikeinstellungen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, setzen Sie das Gerät auf die Fabrikeinstellungen zurück.

Indem Sie diese Funktion einschalten, stellen Sie beim Gerät

die Fabrikeinstellungen wieder her.

Dies gilt für alle erweiterten Funktionen und die zuletzt verwendeten Voreinstellungen für die Vergrößerung.

Softwareversion

Auf der dritten und letzten Seite der erweiterten Einstellungen finden Sie die installierte Softwareversion.

6 Switch Screen

Schließen Sie das HDMI-Kabel von einem der HDMI-Ports an der Rückseite des i-See Touchs an Ihren Computer an. Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen dem i-See Touch und Ihrem Computer umzuschalten.

7 Richtlinien

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die EMV-Richtlinie (2014/30/EG) und die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EG), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Die Einhaltung dieser Richtlinien umfasst die Konformität mit folgenden Standards:

Sicherheit: EN62368-1


EMC: EN55032; EN55024

Das Gerät erfüllt auch die FCC Teil 15 Klasse B

DE

8 WEEE & RoHS Richtlinien

WEEE-Hinweis

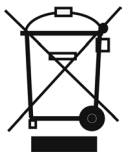

Das WEE-Zeichen (siehe die Abbildung links) auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen über die Entsorgung und Wiederverwertung von elektronischen und elektrischen Geräten sowie über Sammelstellen entnehmen Sie bitte den vor Ort geltenden Vorschriften.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Dieses Produkt erfüllt die Beschränkungen der Richtlinie zur Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen (RoHS-Richtlinie).

9 Garantieinformationen

Wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrem Gerät Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler.

Eine Nutzung des Geräts, die von der in diesem Handbuch beschriebenen Nutzung abweicht, schließt es jeglicher Garantie aus.

10 Technische Daten

Auflösung		1920 x 1080	
Video-Erneuerungsgeschwindigkeit		50 Hz oder 60 Hz	
Bildschirmgröße		22 Zoll (54,6 cm)	
Anzeigemodi Diese Anzeigemodi können im erweiterten Menü des i-See Touch Startmodus ausgeschaltet werden.	Foto	Vollfarben (oder hohe Sättigung)	
		Graustufen	
	Hohe Kontraststärke	Schwarz - Weiß	Schwarz - Gelb
		Weiß - Schwarz	Gelb - Blau
		Grün - Schwarz	Blau - Gelb
		Schwarz - Grün	Rot - Schwarz
Gelb - Schwarz	Schwarz - Rot		
Vergrößerungen (Bei einem 22-Zoll-Bildschirm)	Minimum	≈ 2,3x (im Schnittmodus ≈1x)	
	Maximum	≈ 65x	
Lesehilfe	Horizontale Leselinie	Bei allen Modellen verfügbar	
	Vertikale Leselinie	Bei allen Modellen verfügbar	
	Horizontale Blockausblendung	Bei allen Modellen verfügbar	
	Vertikale Blockausblendung	Bei allen Modellen verfügbar	
Abmessungen	22"	48 x 48 x 65 cm (Bildschirm in der höchsten Position)	
Bevorzugte Switch-Screen-Einstellungen		1920 x 1080	
Gewicht		16 kg	
Stromversorgung		12 VDC / 4A	
Anwendungsbedingungen		Temperatur +5°C bis + 50°C	
		Luftfeuchtigkeit <70%, keine Kondensation	
Lager- und Transportbedingungen		Temperatur +0°C bis + 50°C	
		Luftfeuchtigkeit <90%, keine Kondensation	

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

table des matières

1	Introduction.....	33
2	Installation, sécurité et entretien.....	33
	Installation.....	33
	Réglez l'inclinaison de l'écran	33
	Réglez la hauteur de l'écran.	34
	Connexion des câbles	34
	Transport d'i-See Touch	34
	Astuces pour l'utilisation	34
3	Commandes – écran	35
3.1	Modes d'affichage.....	35
3.2	Zoom	35
3.3	Bloquer la mise au point automatique	35
3.4	Luminosité.....	35
3.5	Contraste	35
3.6	Balance des Blancs	36
3.7	Aides avancées à la lecture.....	36
3.8	Tableau	36
3.9	Poignée de frein	36
4	Commandes - Commande à distance	37
5	Menu avancé	37
6	Écran de commutation	39
7	Réglementation.....	39
8	Directives DEEE et RoHS	39
9	Informations sur la garantie	39
10	Spécifications techniques.....	40

1 Introduction

Félicitations pour votre i-See Touch : une télévisionneuse de bureau de haute qualité, très facile à utiliser car tactile.

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre i-See Touch. Ce manuel fait référence à i-See Touch et i-See Touch à écran de commutation.

Il explique l'installation de l'appareil et décrit toutes ces fonctions.

2 Installation, sécurité et entretien

Contenu de la boîte

La boîte de l'i-See Touch contient les éléments suivants :

- i-See Touch ou i-See Touch à écran de commutation
- Adaptateur de courant
- Manuel
- Télécommande et récepteur de commande à distance (accessoire en option)
- Câble HDMI (pour i-See Touch à écran de commutation seulement)

Installation



N'ouvrez jamais l'appareil car cela annulerait votre garantie. Si vous pensez que l'appareil doit être entretenu ou réparé, veuillez contacter votre fournisseur.

L'i-See Touch est livré pré-assemblé. Vous devez tout simplement faire glisser l'écran jusqu'à la hauteur souhaitée, de raccorder l'adaptateur et de mettre le périphérique sous tension.

FR

Réglez l'inclinaison de l'écran.

L'écran peut être incliné en le tenant fermement des deux côtés (gauche et droite) et en l'inclinant vers votre position préférée.



Réglez la hauteur de l'écran.

La hauteur de l'écran peut être réglée en le tenant fermement des deux côtés (gauche et droite) et en le remontant ou en l'abaissant vers votre position préférée.



Connexion des câbles

Seul le cordon d'alimentation doit être raccordé. Insérez-le au dos du périphérique, puis dans une prise murale.

Transport d'i-See Touch

Si l'appareil doit être transporté, il est conseillé de le faire dans son emballage d'origine afin d'éviter tout dommage potentiel.


FR

Astuces pour l'utilisation

- Évitez lumière du soleil directe à l'écran et sur le tableau.
- Faites attention en manipulant les pièces mobiles de la table de lecture.
- L'i-See Touch nécessite peu, voire aucun entretien. Un chiffon sec suffit pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. L'usage de produits nettoyants corrosifs comme l'alcool, l'acétone ou d'autres substances chimiques, est interdit.
- N'utilisez pas l'i-See Touch comme une aide pour marcher, s'asseoir ou se lever/
- Éteignez l'appareil si vous ne souhaitez pas l'utiliser.
- Veillez à ce que l'i-See Touch soit placé dans une pièce bien aérée.
- Placez-le sur une surface stable pour l'empêcher de tomber.
- N'utilisez pas votre i-See Touch à l'extérieur. N'exposez pas l'appareil à de grandes variations de températures ou à l'humidité. Ne placez pas votre i-See Touch près d'une source de chaleur.
- Servez-vous seulement des câbles fournis et raccordez l'adaptateur à la prise murale.
- Veillez à le placer à une distance minimale de 10 cm/4 pouces du bord de la table.

3 Commandes – écran

L'interrupteur de marche/arrêt de l'i-See Touch se trouve sur le côté droit inférieur au dos du moniteur. Maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de démarrage ou d'arrêt pour allumer ou arrêter l'appareil.

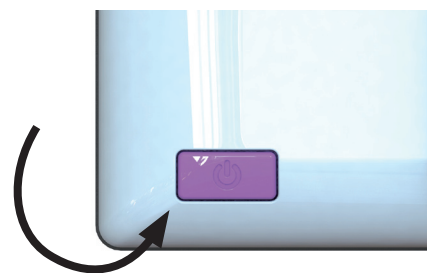

Les commandes de l'i-See Touch se trouvent sous l'écran sous forme de pavés tactiles :



3.1 Modes d'affichage

Toucher

Touchez cette icône pour faire défiler tous les modes d'affichage disponibles.



Appuyer de façon prolongée


Appuyez de façon prolongée sur l'icône du mode d'affichage pour passer rapidement entre votre dernier mode contraste élevé utilisé et le mode couleur.

Balayer

Balayez de gauche à droite pour passer au mode d'affichage suivant du cycle. Balayez de droite à gauche pour passer au mode d'affichage précédent.

3.2 Zoom

Touchez ou appuyez de façon prolongée sur l'icône moins pour un zoom arrière. Touchez ou appuyez de façon prolongée sur l'icône plus pour un zoom avant. Le niveau d'amplification s'affichera à l'écran.

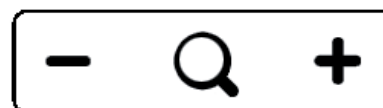

FR

3.3 Bloquer la mise au point automatique


Lorsque vous touchez l'icône loupe, l'appareil procède à une mise au point sur votre document à lire et bloque la mise au point automatique à ce niveau. Touchez un bouton de zoom pour la débloquer.



3.4 Luminosité

Toucher

Touchez cette icône vous permet de faire défiler les 5 niveaux de luminosité.

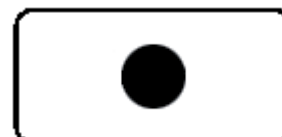

3.5 Le contraste

Balayer et maintenir

Faites glisser cette icône de gauche à droite et maintenez votre doigt sur le côté droit du rectangle arrondi pour augmenter progressivement le contraste.

Faites glisser cette icône de droite à gauche et maintenez votre doigt sur le côté gauche du rectangle arrondi pour diminuer progressivement le contraste.

Le contraste ne peut être réglé que dans les modes de contraste élevé, pas dans les modes photo.

3.6 La Balance des Blancs

Balayer et maintenir

Faites glisser cette icône de gauche à droite et maintenez votre doigt sur le côté droit du rectangle arrondi pour augmenter progressivement le contraste.

Faites glisser cette icône de droite à gauche et maintenez votre doigt sur le côté gauche du rectangle arrondi pour diminuer progressivement le contraste.

La balance des blancs ne peut être réglé que dans les modes photo, pas dans les modes de contraste élevé.

Notez bien que la luminosité, le contraste et la balance des blancs, ne peuvent être réglés lorsque des aides à la lecture sont utilisées.

3.7 Aides avancées à la lecture

Appuyer de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur cette icône pour accéder au menu des aides avancées à la lecture.


Les aides à la lecture suivantes sont disponibles :




suppression
de ligne



suppression
de trame

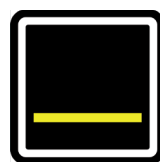

ligne
horizontale

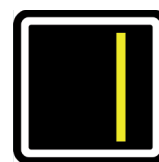

ligne
verticale

Balayez vers le haut ou vers le bas cette icône pour sélectionner l'aide à la lecture requise. Chaque aide à la lecture dispose de 5 réglages indiqués par un nombre affiché sur l'icône. Après la sélection de l'aide à la lecture désirée, touchez cette icône pour la régler.

Vous pouvez toucher cette icône pour modifier la valeur du réglage et passer au niveau suivant, ou balayer de droite à gauche.

Pour passer à une autre aide à la lecture, balayez vers le haut ou vers le bas cette icône, puis touchez-la pour définir le niveau de l'aide sélectionnée.

Appuyez pendant 2 secondes sur cette icône pour quitter le menu des aides avancées à la lecture. L'aide à la lecture va maintenant disparaître de l'écran.

3.8 Tableau

L'i-See Touch est doté d'un tableau sur lequel vous pouvez placer votre document à lire. Le tableau peut se déplacer de gauche à droite, et d'avant en arrière.

3.9 Poignée de frein

Une poignée de frein unique à l'avant du tableau de l'i-See Touch vous permet de contrôler ses mouvements. La poignée a 4 positions :

Gauche	=	Le tableau peut être déplacé librement.
Milieu-gauche	=	Mouvement libre de gauche à droite. Le mouvement d'avant en arrière peut être réglé par incréments de 5 millimètres en déplaçant le tableau.
Milieu-droite	=	Mouvement libre de gauche à droite, le mouvement d'avant en arrière est bloqué.
Droite	=	Tous les mouvements du tableau sont bloqués.

4 Commandes - Commande à distance

Il est possible d'utiliser une télécommande pour contrôler l'i-See Touch. Cette télécommande se vend séparément. Un aperçu des télécommandes disponibles et de leurs fonctions se trouve aux pages 42 et 44 de ce manuel d'utilisation. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.



5 Menu avancé


Le menu avancé de l'i-See Touch vous permet d'activer ou de désactiver certaines fonctions. Pour accéder au menu avancé, éteignez l'appareil puis appuyez pendant environ 10 secondes sur le bouton de marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un bip après la tonalité de démarrage. Vous pouvez passer par de nombreux écrans d'options à sélectionner en appuyant sur l'icône de la luminosité. Touchez l'icône plus du bouton de zoom pour mettre en surbrillance le mode à modifier. Vous pouvez reconnaître la fonction mise en évidence par le rectangle blanc arrondi autour d'elle. Touchez l'icône loupe pour activer/désactiver votre sélection. Pour enregistrer les modifications ou quitter sans procéder à des changements, éteignez puis rallumez l'appareil.



Modes d'affichage

Sur le premier écran, vous pouvez choisir si vous souhaitez que le mode photo ait des couleurs réalistes ou des couleurs à saturation élevée et quel mode de contraste élevé vous souhaitez disposer dans votre mode actif i-See Touch.

Le second écran montre les fonctions avancées.

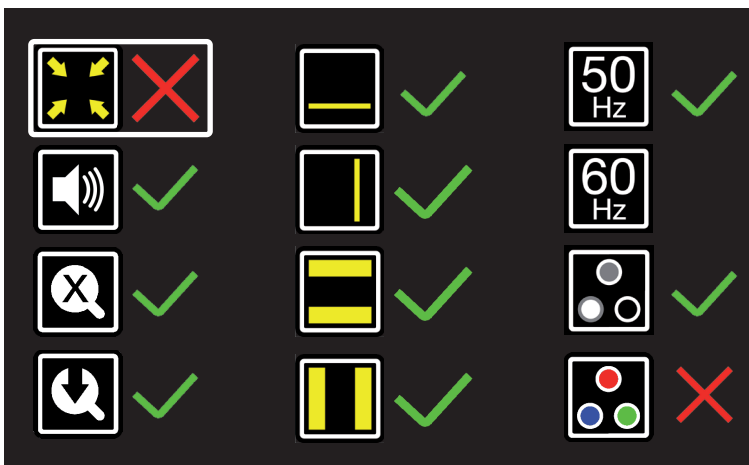

Recadrer le zoom

La fonction recadrer le zoom rogne l'image à l'écran de 50 % pour obtenir un niveau de zoom de 1x. Cette fonction n'est pas activée à l'origine.

Feed-back sonore

Lorsque cette fonction est activée, vous entendez un bip lors du changement de fonction. Cette fonction est activée à l'origine.

FR

Indicateur de grossissement

Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, un indicateur de grossissement apparaît dans le coin supérieur gauche ; il indique le facteur d'agrandissement. Cette fonction est activée à l'origine.



Préréglage du zoom

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil passe au dernier grossissement utilisé dans les modes à contraste élevé et le mode photo lorsque vous passez à ces fonctions. Cette fonction est activée à l'origine.



Aides à la lecture

Ceci va vous permettre d'activer ou de désactiver les aides à la lecture individuellement. Ces fonctions sont prises en charge à l'origine.




Rythme/fréquence de rafraîchissement

En fonction de votre position géographique, la fréquence d'alimentation principale sera soit 50 ou 60 Hertz. En sélectionnant le bon réglage pour l'i-See Touch, vous supprimez le scintillement causé par les sources lumineuses environnantes. Cette fonction est réglée au départ sur 50 Hz.



Contraste

Ce réglage vous permet d'activer ou de désactiver le réglage manuel du contraste. Cette fonction est activée par défaut.

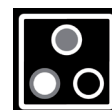

Balance des blancs

Ce réglage vous permet d'activer ou de désactiver le réglage manuel de la balance des blancs. Cette fonction est désactivée par défaut.



Rehan Electronics
i-See Touch
Ver: X.X Cam: X.X

Restauration des paramètres d'usine

En activant cette fonction, vous allez réinitialiser l'appareil et revenir aux paramètres d'usine.

Cela compte pour toutes les fonctions avancées et les préreglages de grossissement utilisés en dernier lieu.



Version de logiciel

Sur la troisième et dernière page des paramètres avancés, vous trouverez la version du logiciel installée.

6 Écran de commutation

Raccordez le câble HDMI de l'un des ports HDMI à l'arrière de l'i-See Touch à votre ordinateur. Appuyez une fois sur le bouton de marche/arrêt pour alterner entre l'i-See Touch et votre ordinateur.

7 Réglementation

Les produits qui possèdent le marquage CE sont conformes à la directive CEM 2014/30/CE et à la directive basse tension 2014/35/CE publiées par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes suivantes :

Sécurité : EN62368-1

CEM : EN55032 ; EN55024

L'appareil respecte également le FCC partie 15 classe B

8 Directives DEEE et RoHS

Avis DEEE



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos ordures ménagères. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de ramassage, veuillez vous référer aux réglementations locales.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la directive sur les restrictions quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).

9 Informations sur la garantie





Pour toutes les questions relatives à la garantie de votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur pour de plus amples informations.

Une utilisation de l'appareil différente de celle décrite dans ce manuel annulera sa garantie.

10 Spécifications techniques

Résolution	1920 x 1080		
Fréquence de rafraîchissement vidéo	50 Hz ou 60 Hz		
Taille de l'écran	22 inch (54,6 cm)		
Modes d'affichage <i>Ces modes d'affichage peuvent être désactivés dans le menu avancé du mode actif i-See Touch</i>	Photographie	Pleine couleur (ou saturation élevée) Échelle de gris	
	Contraste élevé	Noir - blanc	Noir - jaune
		Blanc - noir	Jaune - bleu
		Vert - noir	Bleu - jaune
		Noir - vert	Rouge - noir
		Jaune - noir	Noir - rouge
Amplification (avec un écran 22")	Minimum	≈ 2,3x (en mode recadrer ≈ 1x)	
	Maximum	≈ 65x	
Aide à la lecture	Ligne de lecture horizontale	Disponible sur tous les modèles	
	Ligne de lecture verticale	Disponible sur tous les modèles	
	Bloc d'espace horizontal	Disponible sur tous les modèles	
	Bloc d'espace vertical	Disponible sur tous les modèles	
Dimensions	22"	48 x 48 x 65 cm (écran en position la plus haute)	
Réglages préférés d'écran de commutation	1920 x 1080		
Poids	16 kg		
Alimentation	12 VCC / 4A		
Conditions d'utilisation	Température de +5°C à + 50°C		
	Humidité < 70 %, sans condensation		
Conditions de conservation et de transport	Température de +0°C à + 50°C		
	Humidité < 90%, sans condensation		

Si des questions subsistent après la lecture de ce mode d'emploi, veuillez prendre contact avec votre fournisseur.

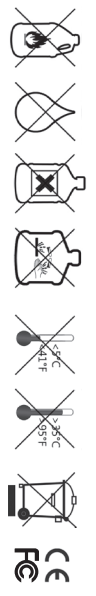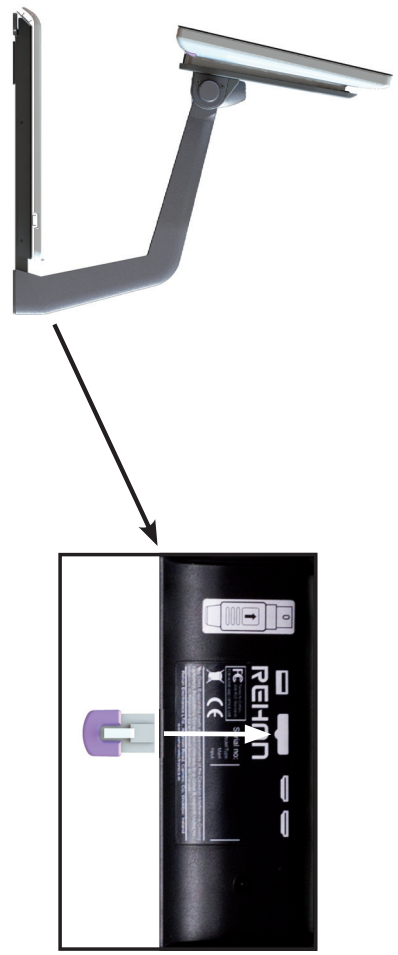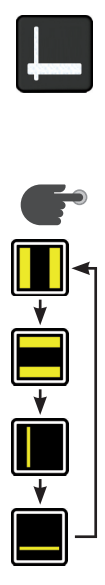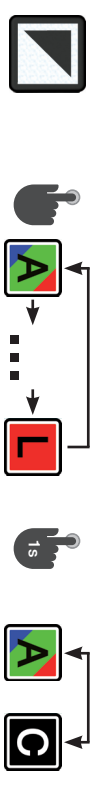

B1

RC



REHAN ELECTRONICS
Aughrim Road
Carnew
County Wicklow
Ireland
www.rehanelectronics.ie